

Laura RadiopharmaTM

Logiciel permettant le contrôle d'instruments radiochromatographiques TEP / TEMP, la saisie des données, et leur analyse

www.lablogic.com

 **LabLogic**
EXPERIENCE & EXPERTISE

La solution idéale pour les installations TEP / TEMP

Laura Radiopharma™ est la norme industrielle. C'est un logiciel qui permet de configurer et contrôler en 1 point unique la saisie des données et leur analyse. Il supporte plus de 350 détecteurs de r-HPLC, scanners r-TLC, analyseurs multicanaux (MCA), GC et modules HPLC des principaux fabricants.

Que vous travailliez dans un environnement réglementé ou académique, il vous suffit d'apprendre à utiliser un seul logiciel pour pouvoir accéder à tout instruments CQ TEP / TEMP.

Facile à utiliser

Laura Radiopharma™ utilise des formats reconnaissables et des Assistants pour des tâches multifonctions afin de les rendre plus faciles à utiliser par plusieurs utilisateurs avec différents niveaux d'expérience.

Ce logiciel présentant une solution unique pour la gamme de disciplines requises dans le département du CQ rend le processus d'apprentissage facile et efficace au jour le jour.

Investissement prudent

Laura Radiopharma™ offre une solution évolutive pour vos besoins de stockage de données, qu'elles soient à partir d'une installation autonome ou bien à partir d'un réseau client/serveur. L'application et les données peuvent être séparées entre les clients locaux et les réseaux de serveurs centraux pour correspondre aux exigences informatiques.

Conformité


Laura Radiopharma™ peut être installée et configurée pour répondre aux exigences de conformité réglementaire les plus rigoureuses. Avec une piste d'audit configurable, une sécurité multi-niveaux, des signatures électroniques et un stockage de données dans un environnement de base de données sécurisé, Laura Radiopharma™ est la réponse de l'industrie TEP / TEMP pour la conformité réglementaire.

Connectivité

Laura Radiopharma™ fournit une connectivité à la plus large gamme de détecteurs et de systèmes de chromatographie, y compris le Flow-RAM™ et Scan-RAM™ pour la détection de la radioactivité ainsi que les systèmes de chromatographie pour HPLC, GC et analyseur multicanaux (MCA).

Correction de demi-vie

La fonction de correction de demi-vie permet aux utilisateurs de corriger pour la demi-vie pendant qu'une exécution est en cours ou bien après l'exécution avec heure et date de référence.

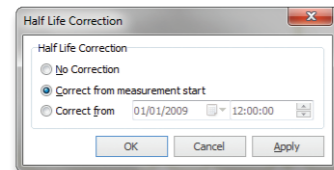

Rapport


Valeurs pertinentes assurées telles que le pourcentage du total de la pureté radiochimique lors des contrôles. Le puissant 'Report Designer' vous permet de configurer plusieurs rapports, de calculer et de présenter des données en temps réel.

Cohérent et sécurisé

Le logiciel permet à l'utilisateur de verrouiller les méthodes, les rapports, etc., pour assurer la cohérence des données.

Signal numérique

Le signal de l'instrumentation de la radiochromatographie est communiqué numériquement en CPS et en CPM.

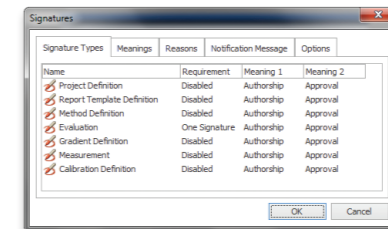

Conformité réglementaire


Laura Radiopharma™ est conçue pour répondre aux exigences réglementaires de conformité pour GxP et FDA 21 CFR section 11 et FDA 21 CFR section 212.

Solution complète de processus de travail

Laura Radiopharma™ guidera l'analyste à travers la procédure complète du CQ. Les méthodes peuvent être prédéfinies et choisies à partir d'une liste déroulante. Des paramètres automatiques sont prévus pour l'intégration des pics et l'impression des rapports.

Intuitif

Laura Radiopharma™ est facile à utiliser, ce qui permet une familiarisation rapide avec le système et une adoption rapide par ses utilisateurs.

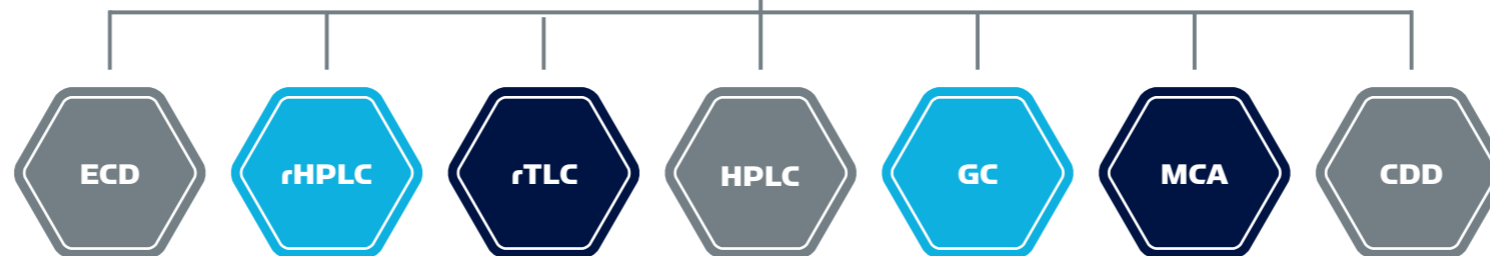

Solution en un seul et unique logiciel

Laura Radiopharma™ est une solution logicielle unique pour l'environnement du CQ TEP / TEMP. Plutôt que d'utiliser plusieurs systèmes de logiciels, l'analyste du CQ peut utiliser Laura Radiopharma™ pour r-HPLC, HPLC, r-TLC, GC et analyseur multicanaux (MCA).

Service et Assistance Technique

Les utilisateurs de nos systèmes bénéficient pleinement d'un support technique et d'un service de maintenance «tout compris».

Toutefois, en cas de difficultés, nous sommes à votre disposition par téléphone ou par e-mail.



Service de validation

Notre service de validation vous permet d'implémenter et de profiter de façon optimale votre investissement dès que possible.

Nous travaillons en partenariat avec vos Services de Qualité et vos Services Techniques ainsi que les utilisateurs afin d'assurer un plan de validation personnalisé en fonction de vos besoins.

Nos spécialistes en validation incorporent des années d'expertise dans les applications des principes BPL, ainsi que des connaissances approfondies des produits, conjointement avec les normes en vigueur provenant d'autres industries; peuvent de ce fait répondre aux consignes de la compagnie et aux exigences réglementaires.

Formation

LabLogic peut vous donner divers cours, programmes et ateliers de formation, afin de faciliter l'utilisation de vos instruments et de vos logiciels et d'en bénéficier davantage.

Toute formation est effectuée par nos experts spécialistes des produits et du soutien technique qui ont de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation et le développement des instruments et des logiciels.

Des certificats peuvent être fournis pour complimenter vos dossiers de formation BPL internes.

En Europe et dans le monde entier

LabLogic Systems Limited

Innovation House, 6 Europa View
Sheffield, S9 1XH, UK

E-mail: solutions@lablogic.com

Tel: +44 (0)114 266 7267

www.lablogic.com

USA & Canada

LabLogic Systems, Inc.

3901 Centerview Drive, Suite B
Chantilly, VA 20151, USA

E-mail: solutions@lablogic.com

Tel: +1-703-429-4209

www.lablogic.com



LabLogic

EXPERIENCE & EXPERTISE



INVESTORS IN PEOPLE
We invest in people Gold

